

Emésztőrendszeri gyorsteszt

A székletben található rejtett vér jelentését kimutató gyorseszteszt

Fontos jel: szabad szemmel nem látható vér a székletben

Az életkorral nő annak a kockázata, hogy szabad szemmel láthatatlan vér van a székletben. Ezt a vért okkult székletvérnek (FOB) is nevezik. Az olyan bélbetegségek mellett, mint például a divertikulitisz, a kolitisz vagy a bélpolipok, a székletben lévő vér kezdődő bélrákra is utalhat.

Derítse ki, mi a helyzet: emésztőrendszeri gyorseszteszt

Az emésztőrendszeri gyorsesztesztel gyorsan és egyszerűen megállapítható, hogy a székletében jelen van-e szabad szemmel nem látható vér. Ha igen, orvosával beszélje meg a további teendőket.

Mennyire megbízható a Veroval® teszteszt?

Az emésztőrendszeri gyorsesztesztet azzal a céllal fejlesztették ki, hogy a modern diagnosztika pontosságát és biztonságosságát otthoni, saját használatra is elérhetővé tegyék. Ez a teszt 40 ng/ml fölötti mennyiségben jelen lévő humán hemoglobin (Hb) kimutatásán alapul. **A teljesítményértékelési vizsgálatokkal megállapított megbízhatóság nagyobb, mint 98 %.**

A teszt elvégzése bonyolult?

Nem: Önnek mindössze tiszta kezekre, egy órára és egy lapos asztalfelületre van szüksége. A teszt pontos menete a hátoldalon található. A használati utasítás figyelmes elolvasásával megtudhatja, hogyan kell az eredményeket megállapítani és értelmezni. Fontos, hogy minden részletet megértse, mielőtt elvégezné a tesztet.

Fontos információ:

A pozitív teszteredményeknek is lehetnek teljesen ártalmatlan okai, ugyanakkor a negatív eredmény sem mindig jelenti azt, hogy minden rendben van. A végleges diagnózist orvosnak kell felállítania. Az újonnan felmerülő kockázatok időben történő felismeréséhez ajánlatos az gyorseszteszt rendszeresen megismételni a gyomor- és bélrendszeri szűréshez.

* **Álnegatív** = tévesen negatív teszteredmény jelenik meg, annak ellenére, hogy az eredmény valójában pozitív.

www.veroval.hu

Komponensek

- 1 tesztkazetta fóliatásakban
- 1 cső mintahígító puffer oldattal és beépített mintavételi pálcikával
- 1 székletfelfogó segédeszköz a minta levételére
- 2 db egyszer használatos kesztyű

PAUL HARTMANN AG
Paul-Hartmann-Straße 12
89522 Heidenheim,
Germany

- 1 használati utasítás

Szimbólumok magyarázata

Vegye figyelembe a használati utasításban leírtakat!	In vitro diagnosztikum (Testen kívüli alkalmazásra)	Lejárat dátum (lásd a csomagoláson található nyomtatott szöveget)
2 °C – 30 °C hőmérsékleten szárazon tárolandó. Nem fagyasztható.	A tartalma 1 vizsgálathoz elegendő	Ne használja újra.
Gyártó	Tételszám (lásd a csomagoláson található nyomtatott szöveget)	
5 perc Reakcióidő a tesztkazettában	Gyorsteszt saját felhasználásra	

5 perc


Pontosság
> 98 %


Teljesítményadatok:

	Referenciateszt			
		Pozitív	Negatív	Összesen
	Pozitív	68	1	69
	Negatív	2	49	51
	Összesen	70	50	120

Érzékenység: 97,14 % Specificitás: 98,00 % Pontosság: 98,55 %

Mire kell figyelnem?

Figyelmeztetések és fontos tanácsok:

- Ez a teszt kizárólag testen kívüli alkalmazásra szolgál.
- Egyik tesztkomponenst se vegye be. Ügyeljen arra, hogy a mintahígító puffer ne kerüljön bőrre vagy a szembe.
- Tartsa a tesztet gyermekektől elzárva.
- Ne tegye ki a tesztet közvetlen napfény vagy fagy hatásának. Nem fagyasztható. Száraz helyen tárolandó 2 °C és 30 °C között.
- A termék csak a csomagolásra nyomtatott lejárati dátumig használható.
- Téves teszteredményekhez vezethet, ha a használati utasítást nem követik megfelelően.
- Ne használja a tesztet, ha a csomagolás sérült. Ne használjon sérült tesztkomponenseket.
- Álnegatív eredmények* ritka esetekben előfordulhatnak.
- Az összes tesztkomponens kizárólag ehhez a teszthez használható. A tesztet alkalmazás után ne használja újra!
- A fóliatásak felnyitása után a tesztet azonnal vagy egy órán belül el kell végezni.
- A gyenge látás, a színvakság vagy a nem megfelelő világítás akadályozhatja a teszt megfelelő kiértékelését.
- Az összes tesztkomponens a háztartási hulladékba dobható.

NanoRepro AG
Untergasse 8
D-35037 Marburg



Forgalmazó:
HU – HARTMANN-RICO Hungária Kft.
2051 Biatörbágy, Budapest
info@hu.hartmann.info

Használati utasítás – Magyar
Felülvizsgálat ideje: 2015. november (Rev. 00)

Emésztőrendszeri gyorseszteszt Saját felhasználásra való gyorseszteszt A következőképpen kell alkalmazni:


- 1** • Helyezze a tesztkomponenseket maga elé, az asztalra. Még ne nyissa ki a fóliacsomagolást.




- (1) Tesztkazetta fóliatasakban
(2) + (3) 1 cső mintahígító puffer oldattal és beépített mintavételi pálcikával
(4) Székletfelfogó segédeszköz a minta levételére
(5) Egyszer használatos kesztyűk

Előkészítés

Mielőtt nekifogna a tesztnek hagyja, hogy a tesztkazetta és a mintahígító puffer elérje a szobahőmérsékletet (15 °C – 27 °C). Szükség esetén használja a mellékelt eldobható kesztyűket. Használja a székletfelfogó segédeszközt és ügyeljen arra, hogy a székletminta ne érintkezzen vízzel vagy a vécécsésze vizével, mivel ez megzavarhatja az eredményt.

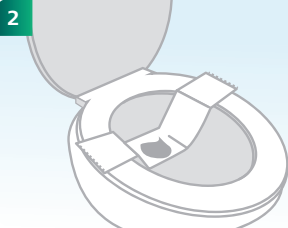

- Válassza le a székletfelfogó segédeszköz (4) ragasztós felületét a nyíl irányában és erősítse a papírcsíkokat a WC-ülőke hátsó részére ügyelve arra, hogy ne érintkezzenek vízzel.
• A székletmintát fogja fel a székletfelfogó segédeszközzel (4).

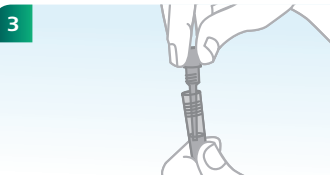


- Csavarja le a világoskék mintavételi pálcikát (3) a mintahígító puffert (2) tartalmazó csőről. Ügyeljen arra, hogy semmi se menjen veszendőbe.




- Vegyen székletmintát különböző helyekről. A mintának be kell fednie teljesen a bordázott mintavételi hegyet.
• A mintavételi pálcikát (3) helyezze vissza a csőbe (2) és csavarja a helyére.

- 4** • Nyissa ki a fóliatasakot (1) és helyezze a tesztkazettát sima felületre.

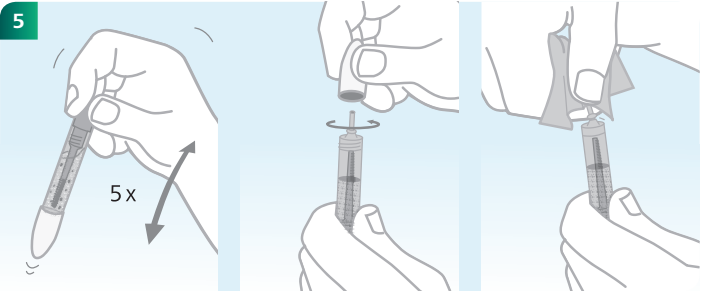

- A csövet (2) erősen rázza fel (5-ször), amíg a székletminta és a mintahígító puffer nem keveredik össze megfelelően. Ügyeljen arra, hogy a keverékben ne maradjanak nagyobb darabkák.
• Csavarja le a fehér zárósapkát. Majd papírzsebkendő segítségével törje le a hegyet. (Ügyeljen arra, hogy ne ömöljön és ne freccsenjen ki semmi.)

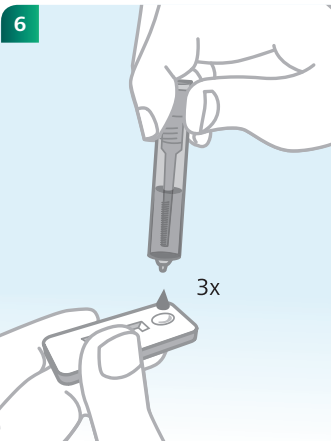


- Tartsa a csövet függőlegesen, és cseppentsen 3 cseppet a tesztkazetta (1) ovális alkalmazási területére (S).

- 7** • A teszt akkor kezdődik, amikor a tesztkazettában (1) vörös áramló mozgás látható. Az eredményt pontosan 5 perc után olvassa le.

Az eredmény kiértékeléséhez először állapítsa meg, hogy a tesztablakban a (C) alatt látható-e egy vonal. Lényegtelen, hogy a kontrollvonal mennyire hangsúlyos.


Pozitív eredmény

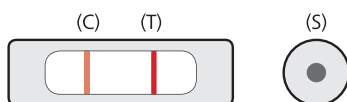

A tesztresultátus **pozitív**, ha a **kontrollmezőben (C)** a világostól sötétpirosig terjedő színű vonal jelenik meg, és a **tesztmezőben (T)** is egy világostól sötétpirosig terjedő színű vonal látható.

A teszt azt mutatja, hogy rejtett **vér mutatható ki az Ön székletében**. A végleges diagnózishoz keresse fel orvosát.


Negatív eredmény

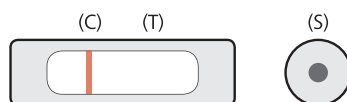

A tesztresultátus **negatív**, ha a **kontrollmezőben (C)** megjelenik egy világostól sötétpirosig terjedő színű vonal, de a **tesztmezőben (T)** **nem látható piros vonal**.

A teszt azt mutatja, hogy a székletében **nem mutatható ki rejtett vér**. Ha gasztrointesztinális panaszok vagy más tünetek állnak fenn, további diagnosztikai értékelésre van szükség, amihez a kezelőorvosa nyújthat segítséget.

Érvénytelen eredmény

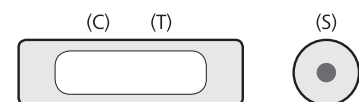

Ha **nem lát kontrollvonalat (C)** vagy **csak egy tesztvonalat (T)** látható, a tesztet nem megfelelően hajtották végre, ezért érvénytelen.

Ellenőrizze, hogy pontosan betartotta-e a használati utasítás minden pontját. Végezzen új vizsgálatot egy új székletmintával.