

## Prevención intestinal

Test rápido para la detección de sangre oculta en heces

5 min Precisión > 98 %



### Una señal importante: sangre oculta en heces

Con la edad, aumenta el riesgo de aparición de sangre oculta en heces. Esta sangre también se denomina FOB (del inglés: Faecal occult blood). La sangre en las heces puede ser indicador de posibles enfermedades intestinales como diverticulitis, colitis o pólipos intestinales e, incluso, podría llegar a indicar el inicio de un cáncer intestinal.

### Es bueno saber qué pasa: test rápido de prevención intestinal

Con el test rápido de prevención intestinal, puede averiguar de forma rápida y sencilla si se presenta sangre oculta en sus heces. En tal caso, consulte con su médico las medidas de prevención que debe tomar. Producto bajo prescripción médica en España.

### ¿Es fiable el auto-test Veroval®?

El test rápido de prevención intestinal se ha desarrollado con el objetivo de ofrecer la precisión y la fiabilidad de los diagnósticos modernos disponibles para el uso doméstico. Se basa en la detección de la hemoglobina humana (Hb) a partir de un valor de 40 ng/ml. **Precisión superior al 98 % demostrada en estudios de evaluación de funcionalidad.**

### ¿Es complicado realizar el test?

No: únicamente deberá lavarse las manos y disponer de un reloj y una mesa plana. En el dorso encontrará las instrucciones para realizar la prueba. Para saber cómo se obtiene y se interpreta el resultado, lea detenidamente las instrucciones de uso. Debe entender todos los detalles antes de realizar el test.

### Información importante:

**Los resultados positivos del test pueden originarse por causas inofensivas. Los resultados negativos, sin embargo, no siempre indican la ausencia de un problema de salud. Por este motivo el diagnóstico definitivo tendrá que realizarlo siempre con su médico. Para detectar a tiempo nuevos riesgos, se recomienda repetir periódicamente el auto-test de prevención estomacal e intestinal.**

\* Falso negativo = se muestra por error un resultado negativo del test, aunque el resultado es positivo.

### Resultados:

	Test de referencia			Total
	Positivo	Negativo	Total	
Test rápido de prevención intestinal	Positivo	68	1	69
	Negativo	2	49	51
	<b>Total</b>	<b>70</b>	<b>50</b>	<b>120</b>

Sensibilidad: 97,14 % Especificidad: 98,00 % Precisión: 98,55 %

### ¿Qué se debe tener en cuenta?

#### Advertencias e indicaciones importantes:

- El test es solo para uso externo.
- No ingerir ningún componente. Evitar el contacto con la piel y con los ojos con el tapón diluyente de muestras.
- Mantener el test fuera del alcance de los niños.
- No exponer el test a la luz solar directa o a escarcha. No congelar. Almacenar en un lugar seco a una temperatura de entre 2 °C y 30 °C.
- No utilizar el producto después de la fecha de caducidad impresa.
- En caso de no seguir las instrucciones de uso detalladamente, es posible que el resultado del test sea incorrecto.
- No utilizar el test si el embalaje está dañado. No utilizar componentes del test dañados.
- En casos aislados, se pueden obtener falsos negativos\*.
- Todos los componentes del test están indicados únicamente para este test. No reutilizar el test.
- Realizar el test inmediatamente después de abrir la bolsa de aluminio o en el plazo de una hora.
- Las dificultades visuales, como el daltonismo, o una iluminación insuficiente pueden dificultar la lectura correcta del resultado.
- Todos los componentes del test pueden desecharse en la basura doméstica.

### Materiales

- 1 dispositivo de test en bolsa de aluminio
- 1 tubo con tapón diluyente de muestras y bastoncillo de toma de muestras integrado
- 1 dispositivo de recogida de heces para toma de muestra
- 2 guantes desechables

PAUL HARTMANN AG  
Paul-Hartmann-Straße 12  
89522 Heidenheim,  
Germany

- 1 folleto de instrucciones de uso

### Significado de los símbolos

Consultar las instrucciones de uso	Producto sanitario para diagnóstico in vitro (para uso externo)	Fecha de caducidad (véase impresión en el embalaje)
Conservar en un lugar seco a 2 °C-30 °C. No congelar.	Contenido suficiente para 1 prueba	No reutilizar
Fabricante	Lote (véase impresión en el embalaje)	
Tiempo de reacción en el dispositivo de test	Auto-test rápido para uso doméstico	

NanoRepro AG  
Untergasse 8  
D-35037 Marburg



Distribución:  
ES – Laboratorios HARTMANN S.A.  
08302 Mataró  
informacion@hartmann.info

### Prevención intestinal

#### Auto-test rápido

Así es como se hace:


- 1** • Coloque los componentes del test encima de la mesa. No abra todavía la bolsa de aluminio.




- (1) Dispositivo de test en bolsa de aluminio  
 (2) + (3) Tubo con tampón diluyente de muestras y bastoncillo de toma de muestras integrado  
 (4) Dispositivo de recogida de heces  
 (5) Guantes desechables

#### Preparación

El dispositivo de test y el tampón diluyente de muestras deben estar a temperatura ambiente (entre 15 °C y 27 °C) antes de empezar el test. Utilice los guantes desechables en caso necesario. Utilice el dispositivo de recogida de heces y asegúrese de que la muestra de heces no entre en contacto con la orina ni el agua del baño, ya que podrían interferir en el resultado.

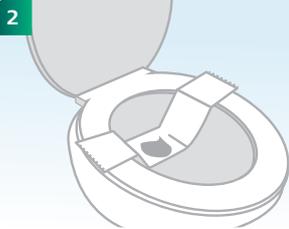

- Retire la superficie adhesiva del dispositivo de recogida de heces (4) en la dirección que indica la flecha y fije las tiras de papel, sin que entren en contacto con el agua, en la parte posterior del asiento del inodoro.
- Recoja la muestra de heces con el dispositivo de recogida de heces (4).

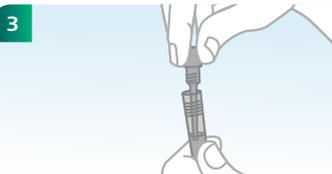


- Desenrosque el bastoncillo de toma de muestras azul claro (3) del tubo con tampón diluyente de muestras (2). Tenga cuidado de no derramar el líquido.




- Tome muestras de diferentes partes de las heces. La punta estriada del bastoncillo de toma de muestras debe estar totalmente cubierta.
- Vuelva a guardar el bastoncillo de toma de muestras (3) en el tubo (2) y ciérrelo.

- 4** • Abra la bolsa de aluminio (1) y coloque el dispositivo de test en una superficie plana.

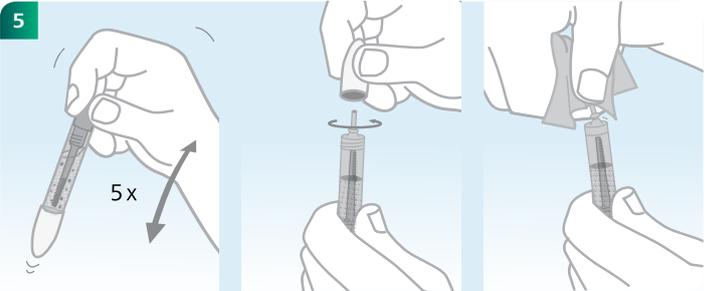

- Agite el tubo (2) enérgicamente (5 veces) hasta que la muestra de heces y el tampón diluyente de muestras se hayan mezclado bien. La mezcla no debe contener grumos grandes.
- Desenrosque la tapa blanca. A continuación, rompa la punta con ayuda de un pañuelo de papel y tenga cuidado de no derramar el líquido.

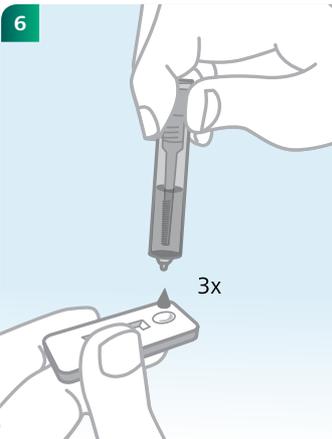


- Sostenga el tubo en vertical y vierta 3 gotas en el campo de aplicación circular (5) de la zona del dispositivo de test (1).

- 7** • La prueba empieza cuando en los campos del dispositivo de test (1) se observa el movimiento de un fluido rojizo. Consulte el resultado al cabo de 5 minutos exactos.

Para interpretar el resultado, inicialmente compruebe si se observa una línea en la ventana de control (C). La intensidad del color de la línea de la ventana de control (C) no es relevante.


#### Resultado positivo

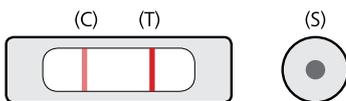

El resultado del test es **positivo** si aparece una línea de color rojo claro u oscuro en la **ventana de control (C)** y una línea de color rojo claro u oscuro en la **ventana del test (T)**.

El test indica que se ha **detectado sangre oculta en sus heces**. Para obtener un diagnóstico definitivo, consulte con el médico.


#### Resultado negativo

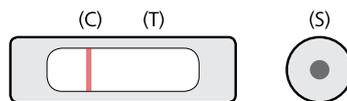

El resultado del test es **negativo** si aparece una línea de color rojo claro u oscuro en la **ventana de control (C)** y **no aparece ninguna línea roja en la ventana del test (T)**.

El test indica que **no se ha detectado sangre oculta en sus heces**. Si las molestias gastrointestinales u otros síntomas persisten, será necesaria una evaluación diagnóstica por parte de su médico.

#### Resultado no válido

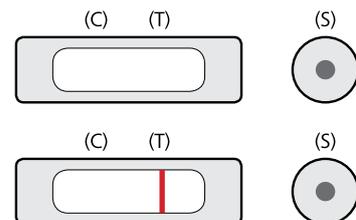

Si **no ve la línea en la ventana de control (C) o solo ve la línea en la ventana del test (T)**, el test no es correcto y no es válido.

Compruebe si ha seguido punto por punto las instrucciones de uso. Realice otro test con un nuevo auto-test de prevención intestinal.