

## Schwangerschaft

Frühtest  
mit Wochenbestimmung

5 min



Zuverlässigkeit  
> 99 %



### Schwanger oder nicht schwanger?

Bei dieser wichtigen Frage wünschen Sie sich sicher eine schnelle und verlässliche Antwort. Sollte sie „Ja“ lauten, möchten Sie bestimmt ebenfalls gern wissen, in welcher Schwangerschaftswoche Sie sich befinden.

### Schön zu wissen, woran man ist: Schwangerschaft Frühtest und Wochenbestimmung in einem

Mit dem Schwangerschaft Frühtest mit Wochenbestimmung können Sie ab dem 10. Tag nach der Befruchtung – also noch vor dem Ausbleiben der Periode – herausfinden, ob eine Schwangerschaft vorliegt. Und wenn ja, in welcher Woche. Der Schwangerschaft Frühtest zeigt Ihnen, ob Sie schwanger sind, sobald eine hCG-Konzentration von 12 IU/L (International Units pro Liter) in Ihrem Harn vorhanden ist. Bei einem positiven Ergebnis sollten Sie mit Ihrem Frauenarzt das weitere Vorgehen besprechen.

### Wie verlässlich ist der Veroval® Test?

Der Schwangerschaft Frühtest mit Wochenbestimmung wurde mit dem Ziel entwickelt, die Genauigkeit und Sicherheit der modernen Diagnostik auch für die private Nutzung zu Hause verfügbar zu machen. Er beruht auf dem immunologischen Nachweis des Schwangerschaftshormons hCG (humanes Choriongonadotropin) und entspricht damit dem modernsten Stand der medizinischen Forschung. **Die durch eine Leistungsbewertungsstudie belegte Zuverlässigkeit beträgt mehr als 99 %.**

### Ist die Testdurchführung kompliziert?

Nein: Alles was Sie brauchen, sind eine Uhr mit Sekundenanzeige und – falls Sie die Bechermethode bevorzugen – einen sauberen Behälter. Den genauen Testablauf finden Sie auf der Rückseite.

### Was muss ich beachten?

#### Lagerung:

- Bewahren Sie den Frühtest und alle Komponenten bei 4 °C bis 30 °C auf.

#### Haltbarkeit:

- Bei Lagerung, wie oben angegeben, siehe Haltbarkeitsdatum auf der Folienverpackung des Teststabs und auf der Außenverpackung.

#### Zuverlässigkeit:

- Die Zuverlässigkeit beträgt mehr als 99 %.

#### Anwendung:

- Nehmen Sie den Teststab erst unmittelbar vor Testdurchführung aus der Folienverpackung.
- **Wir empfehlen, den Test morgens durchzuführen, da im Morgenurin die hCG-Konzentration am höchsten ist.**
- Nicht benutzen, wenn die Folienverpackung geöffnet oder der Teststab beschädigt ist.

#### Entsorgung:

- Alle Komponenten können zusammen mit der Umverpackung in den Hausmüll gegeben werden.
- Das Trockenmittel in der Folienverpackung kann entsorgt werden.

#### Bitte beachten:

- Bei den eingesetzten Testmaterialien (z. B. Antikörper) handelt es sich um potentiell infektiöse Materialien, von denen jedoch keine Gefahr ausgeht, wenn Sie alle Testbestandteile gemäß der Gebrauchsanweisung verwenden.

### Wichtiger Hinweis:

**Bei zu geringer hCG-Konzentration – z. B. bei zu früher Testdurchführung oder stark verdünntem Urin – kann ein negatives Resultat angezeigt werden, obwohl eine Schwangerschaft vorliegt. Umgekehrt kann auch bei positivem Ergebnis die Schwangerschaft verloren gehen, was in den ersten vier Wochen recht häufig der Fall ist. Daher sollten Sie bei Unklarheiten immer Ihren Frauenarzt aufsuchen und/oder ggf. den Frühtest wiederholen.**

[www.veroval.de](http://www.veroval.de)  
[www.veroval.at](http://www.veroval.at)



Gebrauchsanweisung beachten!  
Test außer Reichweite von Kindern aufbewahren.  
Test nach dem Ablaufdatum nicht verwenden.  
Testkomponenten bei 4 °C bis 30 °C lagern.  
Jeden Teststab nur 1-mal verwenden.  
Teststab nicht zerlegen.  
Test nur zur äußeren Anwendung.  
In-vitro-Diagnostikum zur Eigenanwendung.



CARE diagnostica Produktions- und  
Vertriebsgesellschaft m.b.H.  
Römerstraße 8  
AT-2513 Möllersdorf

Vertrieb: DE – PAUL HARTMANN AG,  
89522 Heidenheim  
info@hartmann.info  
AT – PAUL HARTMANN Ges.m.b.H.,  
2355 Wiener Neudorf  
office@at.hartmann.info

ZANL0013-WB-DE-Vero  
Rev00 2015-11

CE 0408

## Schwangerschaft

### Frühtest mit Wochenbestimmung. Und so wird's gemacht:

**1**

**Inhalt:**

- 1 Folienverpackung mit einem Teststab und Trockenmittel
- 1 Gebrauchsanweisung

Es gibt zwei Methoden zur Durchführung:

**3A**

Öffnung für Harnprobe

**Direkte Methode:**

- Teststab ca. 3 Sekunden direkt in den Urinstrahl halten.

**3B**

Max. Eintauchtiefe

**Bechermethode:**

- Urin sammeln, Teststab bis zur maximalen Eintauchtiefe ca. 3 Sekunden eintauchen.


**2**

- Nehmen Sie den Teststab aus der Folienverpackung (Verpackung aufheben).

**4**

- Teststab auf die Folienverpackung legen und nicht bewegen.
- **Nach exakt 5 Minuten das Ergebnis ablesen. Wenn Sie später ablesen, kann die Wochenbestimmung nicht mehr sicher ausgewertet werden.**

### Nicht schwanger

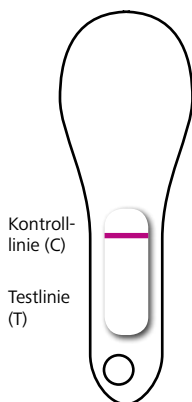

Erscheint nur eine violette Linie (Kontrolllinie) im oberen Bereich des Ergebnisfeldes, wurde der Test richtig durchgeführt, aber es konnte kein hCG nachgewiesen werden. Sie können davon ausgehen, nicht schwanger zu sein.

Falls Ihre Periode nicht innerhalb einer Woche nach Fälligkeit einsetzt, empfehlen wir Ihnen, Ihren Arzt aufzusuchen. Vermeiden Sie bei überfälliger Periode potentielle Risiken wie Röntgen oder Alkoholmissbrauch.

### Schwanger


Erscheinen zwei violette Linien im Ergebnisfeld, wurde im Harn hCG nachgewiesen. Sie können davon ausgehen, schwanger zu sein, auch wenn die untere der beiden Farblinien nur sehr schwach ist. Für die Abschätzung der Schwangerschaftswoche ordnen Sie Ihr Ergebnis einem Bild zu. Die Schwangerschaftswoche wird anhand des ersten Tages Ihrer letzten Periode abgeschätzt.



Woche nach der Befruchtung	1-2	2-3	3+
Schwangerschaftswoche	3-4	4-5	5+

Eine schwache Testlinie kann ein Hinweis auf den Beginn einer Schwangerschaft oder einen schlecht implantierten Embryo sein. Frühgeburtliche Vorsorge ist wichtig. Bitte suchen Sie umgehend Ihren Arzt auf, um Ihre Gesundheit und die Ihres Babys zu sichern. Vermeiden Sie potentielle Risiken für den Embryo (z. B. Röntgen).

### Ungültiges Ergebnis

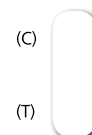

Der Test wird als ungültig gewertet, wenn im Ergebnisfeld nach 5-10 Minuten keine violette Linie oder nur die Testlinie erscheint.

Medikamente oder Erkrankungen (z. B. trophoblastische Krankheiten), die Ihren hCG-Spiegel beeinflussen, können das Ergebnis verfälschen. Die handelsübliche Antibabypille stört den Test allerdings nicht.

### Hinweise:

Nach 20 Minuten kann nicht mehr sicher ausgewertet werden, ob Sie schwanger sind. Mögliche Gründe für ein ungültiges Resultat könnten eine beschädigte Folienverpackung, falsche Lagerung oder ein Anwendungsfehler (z. B. zu geringe Urinmenge) sein. Bitte heben Sie in diesem Fall alle Testmaterialien auf und wenden Sie sich in Deutschland an [info@hartmann.info](mailto:info@hartmann.info) und in Österreich an [office@at.hartmann.info](mailto:office@at.hartmann.info).