

Terhesség

Korai terhességi teszt hét meghatározásával

5 perc



Megbízhatóság
> 99 %



Terhes vagy nem terhes?

Ebben a fontos kérdésben nyilvánvalóan szeretne gyors és megbízható választ. Ha a válasz „igen”, biztosan azt is szeretné tudni, hogy a terhesség hányadik hetében van.

Derítse ki, mi a helyzet: Korai terhességi teszt a terhességi hét meghatározásával

A terhességi hét meghatározására is kiterjedő korai terhességi teszt. A tizedik naptól a megtermékenyítés után számítva (azaz még a menstruáció kimaradása előtt) meghatározható, hogy fennáll-e a terhesség. És amennyiben igen, az is kiderül, hogy hányadik hétben van. A korai terhességi teszt kimutatja, hogy terhes-e, amint a hCG-koncentrációja eléri a 12 NE/l (nemzetközi egység per liter) értéket a vizeletében. Pozitív eredmény esetén beszélje meg nőgyógyászával a további teendőket.

Mennyire megbízható a Veroval® teszt?

A terhességi hét meghatározásával járó gyors terhességi tesztet azzal a céllal fejlesztették ki, hogy a modern diagnosztika pontosságát és biztonságosságát otthoni, saját használatra is elérhetővé tegyék. A teszt a hCG (humán koriongonadotropin) terhességi hormon immunológiai kimutatásán alapul, és ezáltal megfelel a legkorszerűbb orvosi kutatásoknak.

A teljesítőképesség-értékelési vizsgálatokkal megállapított megbízhatóság több, mint 99 %.

A teszt elvégzése bonyolult?

Nem: Mindössze egy másodperc-kijelzős órára és egy tiszta tartályra van szüksége, ha a poharas módszert részesíti előnyben. A teszt pontos menete a hátoldalon található

Mire kell figyelnem?

Tárolás:

- A tesztet és az összes komponensét 4 °C – 30 °C közötti hőmérsékleten kell tárolni.

Eltarthatóság:

- A fent megadott körülmények között történő tárolás melletti eltarthatósági dátum a tesztpálca fóliacsomagolásán és a külső csomagoláson olvasható.

Megbízhatóság:

- A megbízhatóság több, mint 99 %.

Alkalmazás:

- A tesztpalcát csak közvetlenül a teszt végrehajtása előtt vegye ki a fóliacsomagolásból.
- **A tesztet ajánlott reggel elvégezni, mivel a reggeli vizeletben a legmagasabb a hCG koncentrációja.**
- Ne használja, ha a fóliacsomagolást felnyitották, vagy a tesztpálca megsérült.

Ártalmatlanítás:

- Az összes komponens a csomagolással együtt a háztartási hulladékba dobható.
- A fóliacsomagolásban található szárítószer kidobható.

Vegye figyelembe:

- Az alkalmazott tesztanyagok (pl. antitestek) potenciálisan fertőző anyagok, amelyek azonban nem jelentenek veszélyt, ha az összes tesztösszetevőt a használati utasítás szerint alkalmazzák.

Fontos megjegyzés:

Túl alacsony hCG-koncentráció mellett – pl. a teszt túl korai elvégzése vagy erősen hígított vizelet esetén – negatív eredmény jelenhet meg, bár a terhesség fennáll. Ezzel szemben a terhesség pozitív eredmény esetén is megszakadhat, ami elég gyakran előfordul az első négy hétben. Ezért nem egyértelmű esetekben mindig forduljon nőgyógyászhoz, és/vagy adott esetben ismételje meg a tesztet.

www.veroval.hu



Vegye figyelembe a használati utasításban leírtakat!
A tesztet tartsa gyermekektől elzárva.

Ne használja fel a tesztet a lejárat dátum után.

A tesztkomponenseket 4 °C – 30 °C közötti hőmérsékleten kell tárolni.

Mindegyik tesztpalcát csak egyszer szabad használni.

Ne szedje szét a tesztpalcát.

Kizárólag külső használatra szolgáló teszt

In vitro diagnosztikum saját felhasználásra



CARE diagnostica Produktions- und
Vertriebsgesellschaft m.b.H.
Römerstraße 8
AT-2513 Möllersdorf

Forgalmazó:
HU – HARTMANN-RICO Hungária Kft.
2051 Biatörbágy, Budapest
info@hu.hartmann.info

ZANL0013-WB-HU-PH
Rev. 01 2016-06

CE 0483

Terhesség

Korai terhességi teszt hét meghatározásával és a következőképpen kell alkalmazni:

1

Tartalom:

- 1 fóliacsomagolás, amely tesztpálcát és szárítószert tartalmaz
- 1 használati utasítás

A teszt elvégzésének két módszere van:

3A

Nyílás a vizeletmintához

Közvetlen módszer:

- A tesztpálcát tartsa kb. 3 másodpercig közvetlenül a vizeletsugárba.

3B

Max. bemerítési mélység

Poharas módszer:

- Vegye le a vizeletmintát, és merítse bele a tesztpálcát a maximális mélységig kb. 3 másodpercre.


2

- Vegye ki a tesztpálcát a fóliacsomagolásból (bontsa fel a csomagolást).

4

- A tesztpálcát helyezze a fóliacsomagolásra, és ne mozgassa.
- **Pontosan 5 perc múlva olvassa le az eredményt. Későbbi leolvásás esetén a terhességi hét meghatározását már nem lehet biztonságosan értékelni.**

Nem terhes

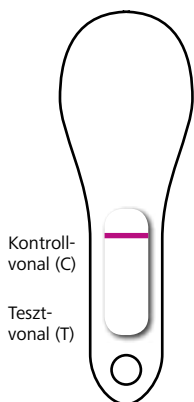

Ha csak egy lila vonal (kontrollvonal) jelenik meg az eredményező felső tartományában, a tesztet helyesen végezték el, de hCG nem mutatható ki. Ekkor feltételezhetően Ön nem terhes.

Ha a ciklusa az esedékesség napjától számított egy héten belül nem kezdődik el, azt javasoljuk, hogy keresse fel orvosát. Késedelmes ciklus esetén kerülje el a lehetséges kockázatokat, mint a röntgensugarat vagy túlzott alkoholfogyasztást.

Terhes


Ha két lila vonal jelenik meg az eredményezőben, a teszt hCG jelenlétét igazolta a vizeletben. Ilyenkor feltételezhető, hogy Ön terhes, még akkor is, ha a két színes vonal közül az alsó csak nagyon halvány. A terhesség hetének megbecsüléséhez az eredményét egy képpel kell összehasonlítania. A terhességi hét becslése az Ön utolsó ciklusának első napja segítségével történik.



Megtermékenyítés utáni hét	1–2	2–3	3+
Terhességi hét	3–4	4–5	5+

A halvány tesztvonal terhesség kezdetére vagy rosszul implantálódott embrióra utalhat. A terhesgondozás fontos. Haladéktalanul forduljon orvoshoz, hogy gondoskodjon saját és kisbabája egészségéről. Kerülje el a magzatot érintő esetleges kockázatokat (pl. röntgensugárzás).

Érvénytelen eredmény

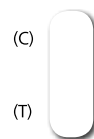

A teszt érvénytelennek tekinthető, ha az eredményezőben 5–10 perc után nem jelenik meg lila vonal, vagy csak a tesztvonal látható.

Olyan gyógyszerek vagy betegségek (pl. trofoblasztos betegségek), amelyek befolyásolják a hCG-szintet, eltorzítják az eredményeket. A kereskedelmi forgalomban kapható fogamzásgátló tablettá viszont nem zavarja a tesztet.

Megjegyzés:

20 perc után már nem lehet biztonságosan értékelni, hogy Ön terhes-e vagy sem. Az érvénytelen eredmény oka lehet a sérült fóliacsomagolás, a helytelen tárolás vagy az alkalmazási hiba (pl. túl kis mennyiségű vizelet). Ilyen esetben tegye félre az összes tesztanyagot, és írjon az info@hu.hartmann.info címre.