

Veroval[®]



Veroval®




V tomto krátkom videonávode vám vysvetlíme, ako môžete vo Veroval® Medi.connect využívať funkciu tlače PDF.

Veroval®




Spustíte Veroval® Medi.connect na svojom počítači.

Veroval®

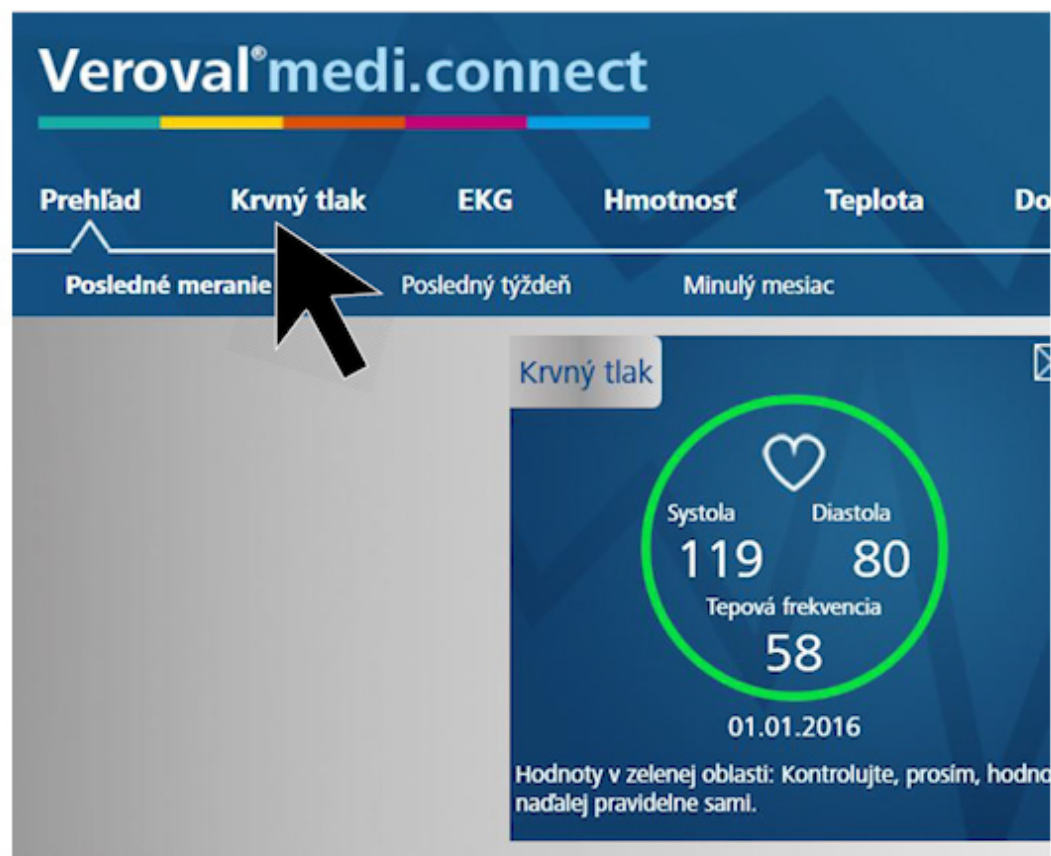

Ak chcete napríklad vytlačiť hodnoty vášho krvného tlaku, kliknite v registri na „Krvný tlak“.

Veroval®

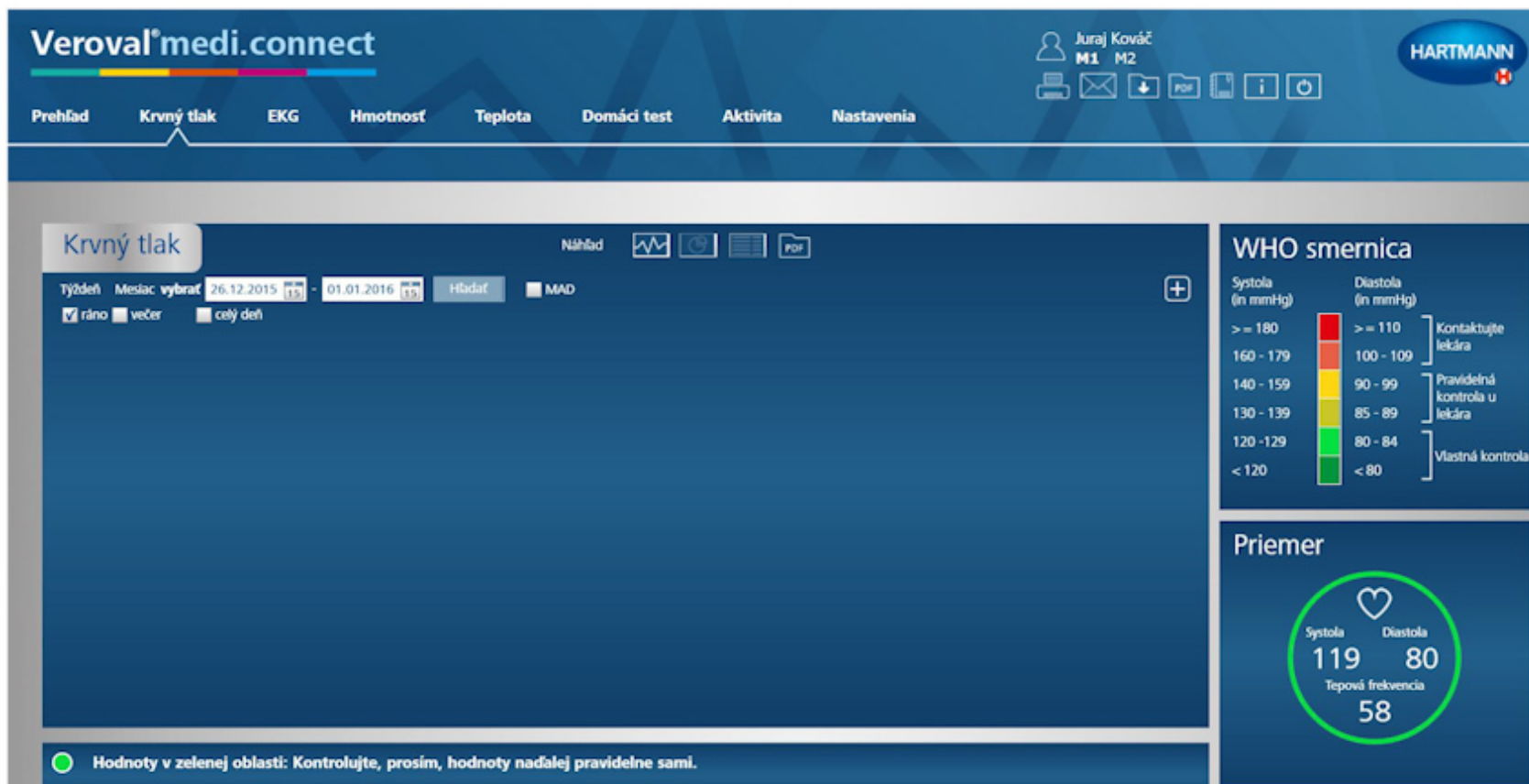

Vyberte obdobie, z ktorého chcete hodnoty zobrazit',...

Veroval®

Veroval® medi.connect

Prehľad Krvný tlak EKG Hmotnosť Teplota

Krvný tlak

Týždeň Mesiac vybrat 26.12.2015 - 01.01.2016 Hľadať MAD

ráno večer celý deň

... kliknutím do políček na výber dátumu.

Veroval®

Veroval® medi.connect

Prehľad **Krvný tlak** EKG Hmotnosť Teplota Domáci te

Krvný tlak Náhľad

Týždeň Mesiac vybrať 07.09.2017 - 13.09.2017 Hľadať MAD

ráno večer

september 2017


po	ut	st	št	pi	so	ne
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8



Vyberte časový úsek...

Veroval®

Veroval® medi.connect

Prehľad Krvný tlak EKG Hmotnosť Teplota Domáci tes


Krvný tlak Náhľad 

Týždeň Mesiac vybrať 07.09.2017  15 - 13.09.2017  15 Hľadať MAD

ráno večer celý deň

september 2017

po	ut	st	št	pi	so	ne
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8




Vyberte časový úsek...

Veroval®

The screenshot shows the Veroval® medi.connect web interface. At the top, there is a navigation bar with the following tabs: Prehľad, Krvný tlak, EKG, Hmotnosť, Teplota, Domáci test, Aktivita, and Nastavenia. Below the navigation bar, the 'Krvný tlak' section is active. It features a title 'Krvný tlak' and a 'Náhľad' (View) button with icons for a line graph, a pie chart, a table, and a PDF document. Below the view options, there is a date range selector showing 'Týždeň' (Week) selected, with dates '23.09.2017' and '29.09.2017'. There are also radio buttons for 'ráno' (morning), 'večer' (evening), and a checked checkbox for 'celý deň' (all day). A 'Hľadať' (Search) button is highlighted with a mouse cursor. To the right of the search button is a checkbox for 'MAD'.


... a kliknite na „Hľadať“.

Veroval®

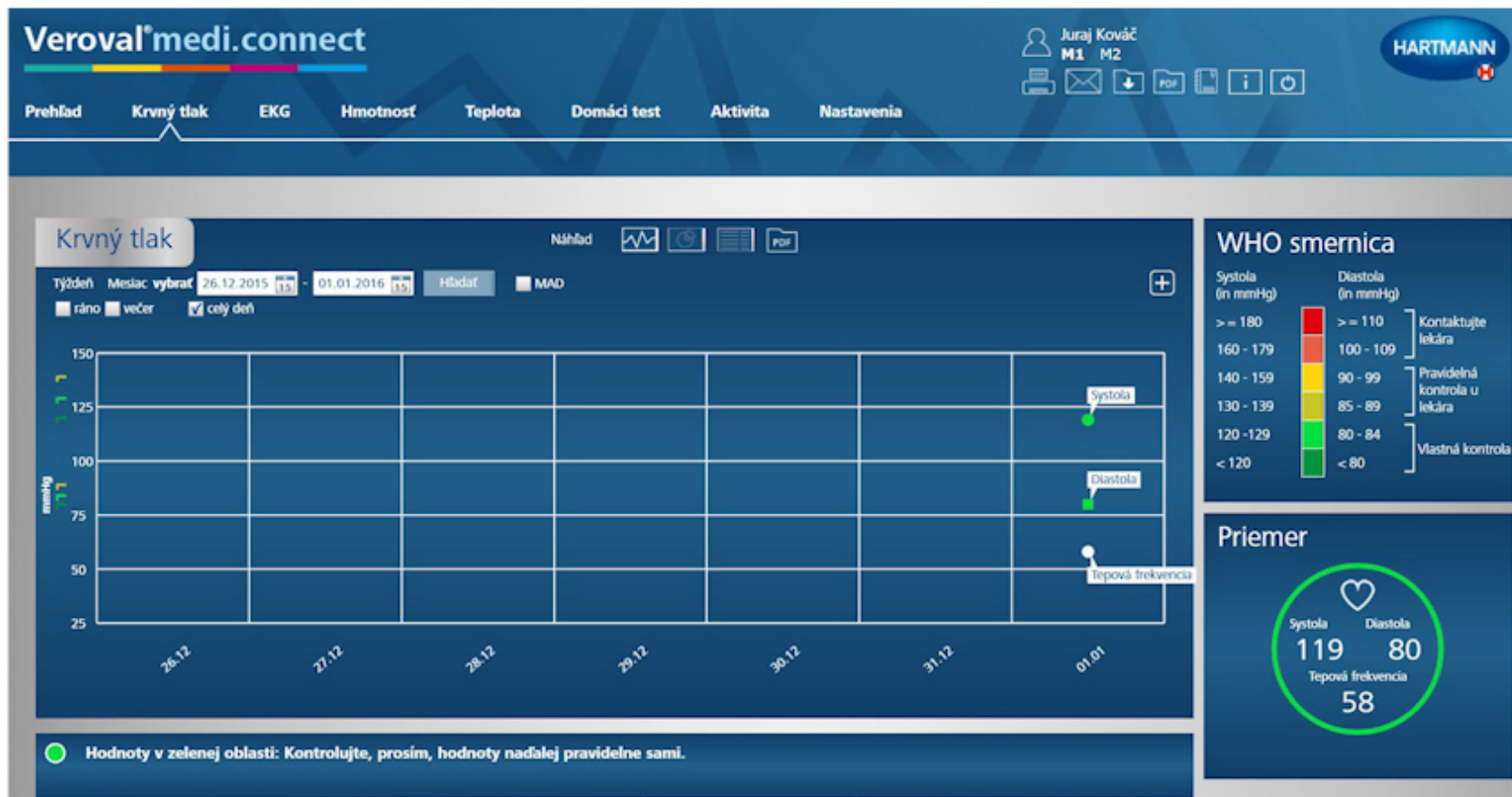

Zobrazí sa grafika s hodnotami v danom časovom období.

Veroval®

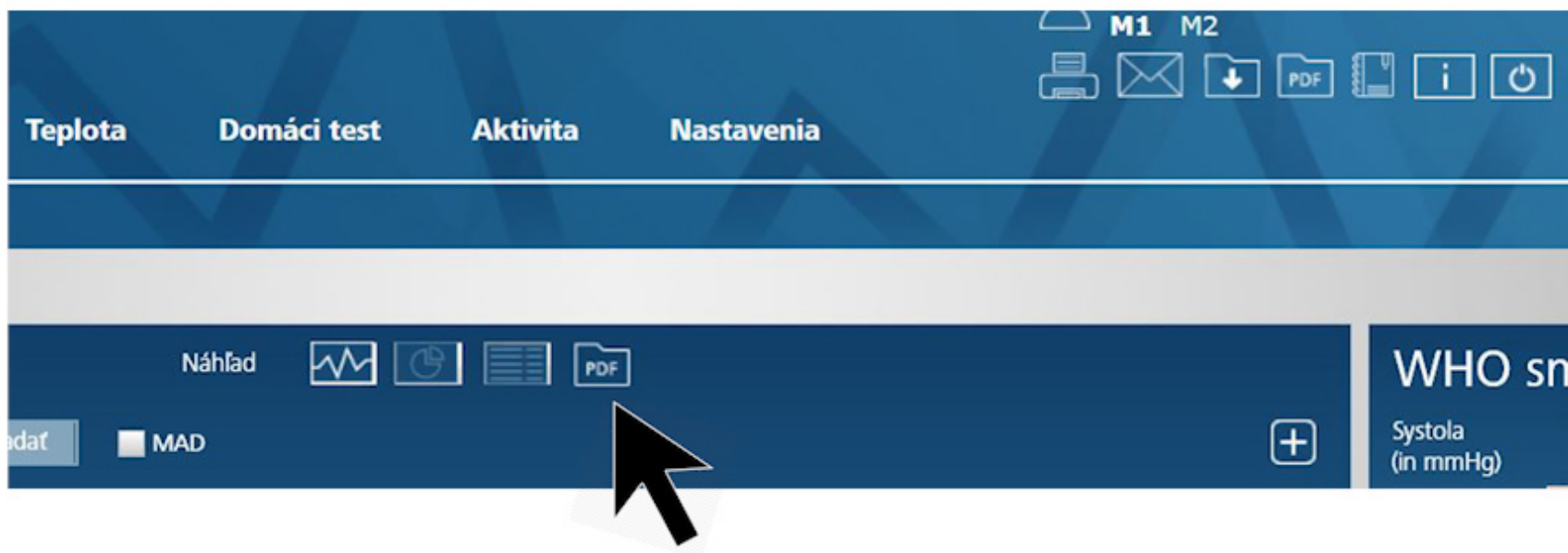

Pre tlač kliknite na „PDF“.

Veroval[®]

The screenshot displays the 'Tlačň náhľad' (Print preview) window of the Veroval software. At the top, there are navigation buttons: 'Tlačň', 'Zvoľť nové', and 'Zavieť'. The main content area is titled 'Prehľad meraní krvného tlaku: 26.12.2015 - 01.01.2016'. It contains patient information in two columns: Pohlavie (Muž), Ulica (Štefánikova 1), Meno (Jurej), POČ (81106), Priezvisko (Kováč), Mesto (Bratislava), Dátum narodenia (16.02.1977), Vek (roky) (40), and Výška (175). Below this is a 'Medikácia' section with the text 'Nie sú k dispozícii žiadne dáta.' The 'Krvný tlak' section indicates 'Celkový počet meraní pre zvolený časový interval: 1' and contains a table with one data row. A legend at the bottom states 'MAD = Stredný arteriálny tlak'.

Dátum	Čas	WHO	Sys. mmHg	Dia. mmHg	Temp./min	Porucha srdcového rytmu	MAD	manuálne	Analýzovať	Denná doba	Medikácia/Poznámka
01.01.2016	01:02	●	119	80	58		93		✓		


Zobrazí sa vám dlhé PDF s rôznymi náhľadmi a prehľadmi.

Veroval®




Vybrané hodnoty zobrazené v grafoch.

Veroval®

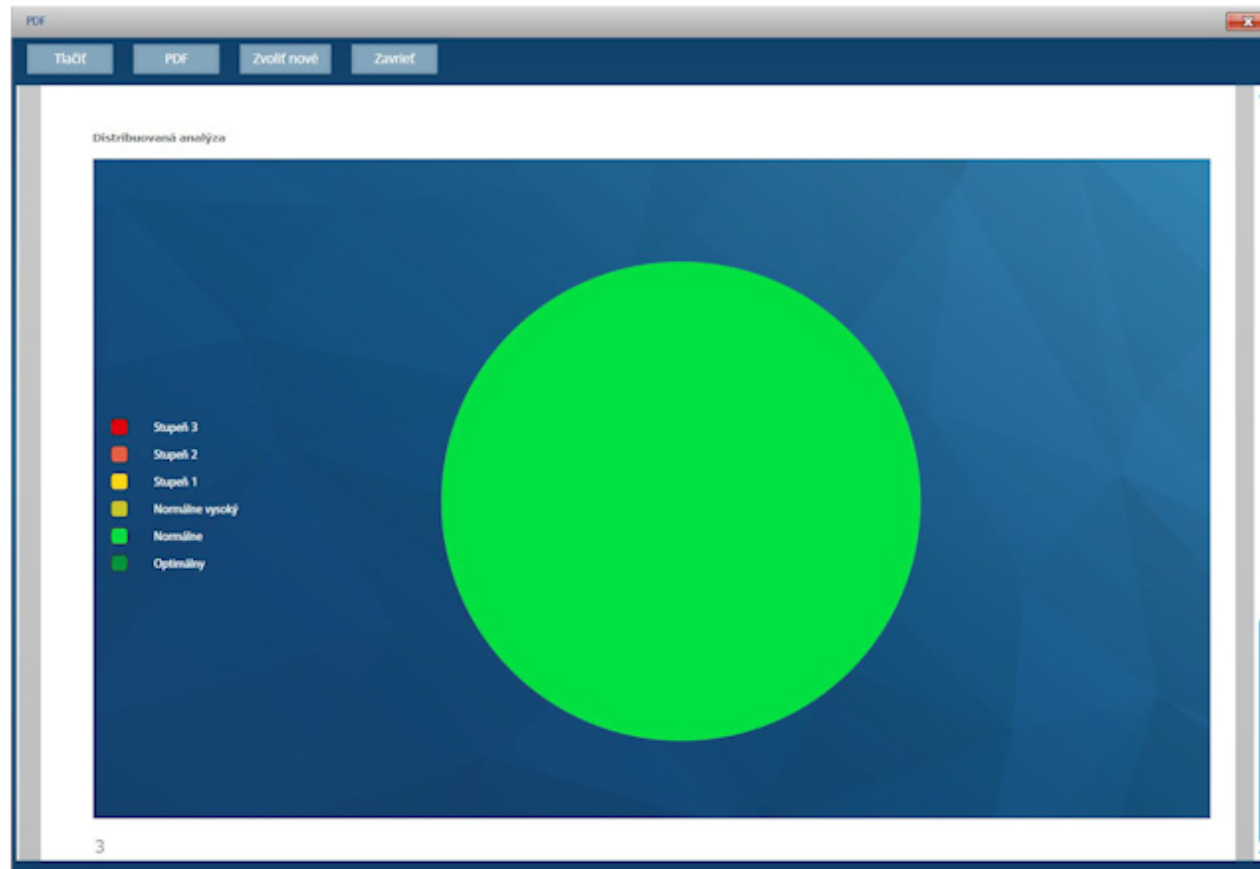


Vybrané hodnoty zobrazené v grafoch.

Veroval®

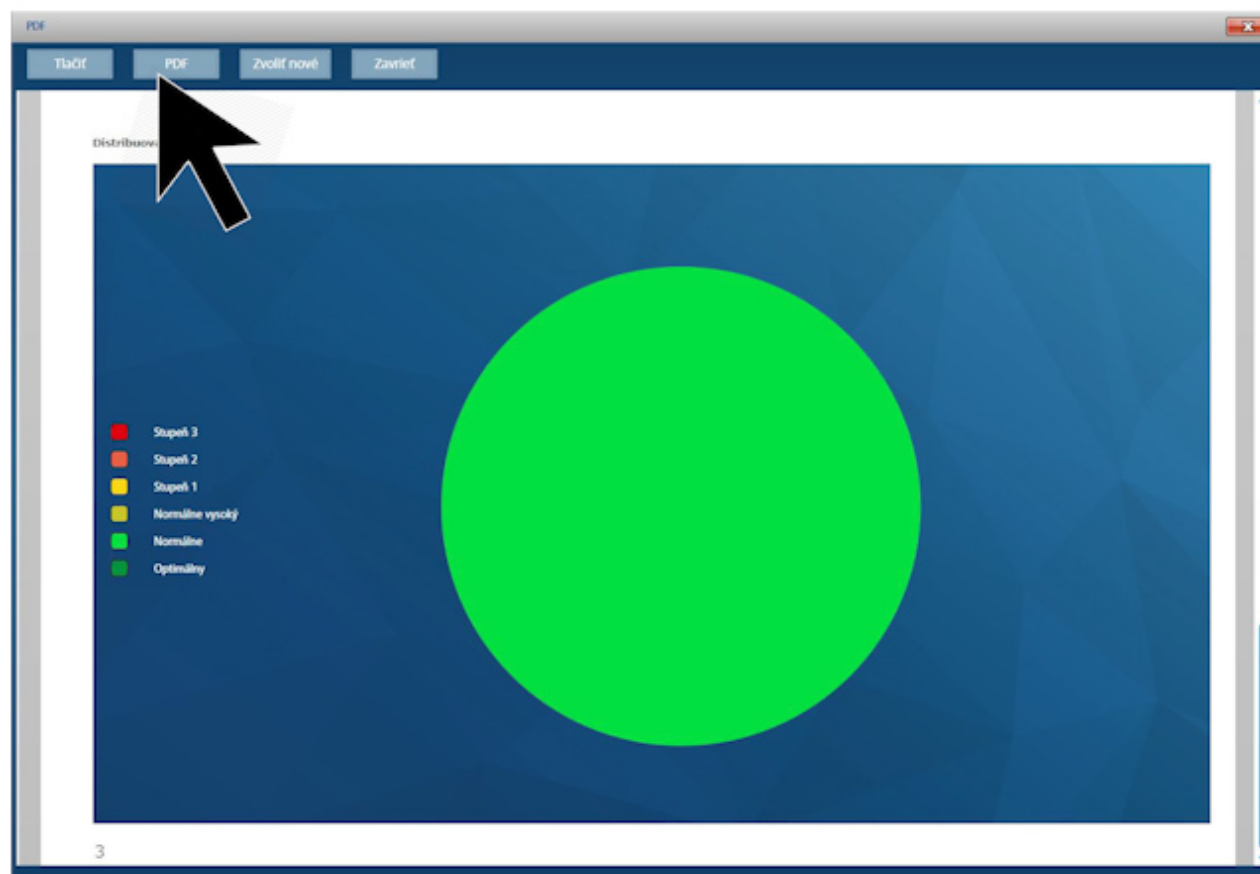


Na uloženie PDF kliknite v otvorenom okne na „PDF“.

Veroval®

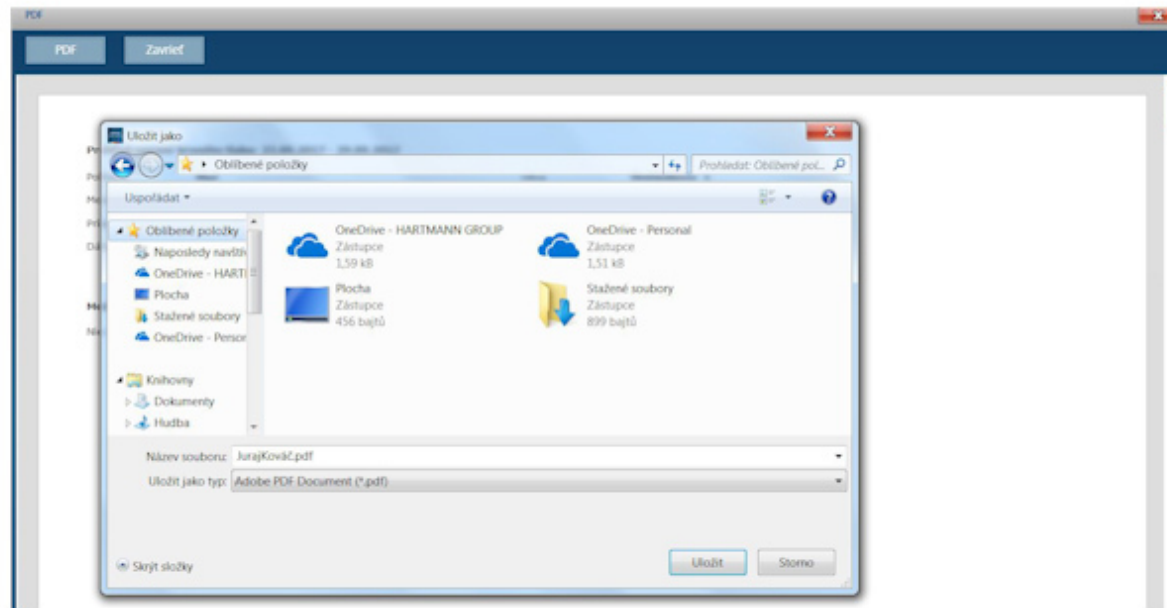


Vyberte požadované umiestnenie a kliknite na „uložiť“.

Veroval®

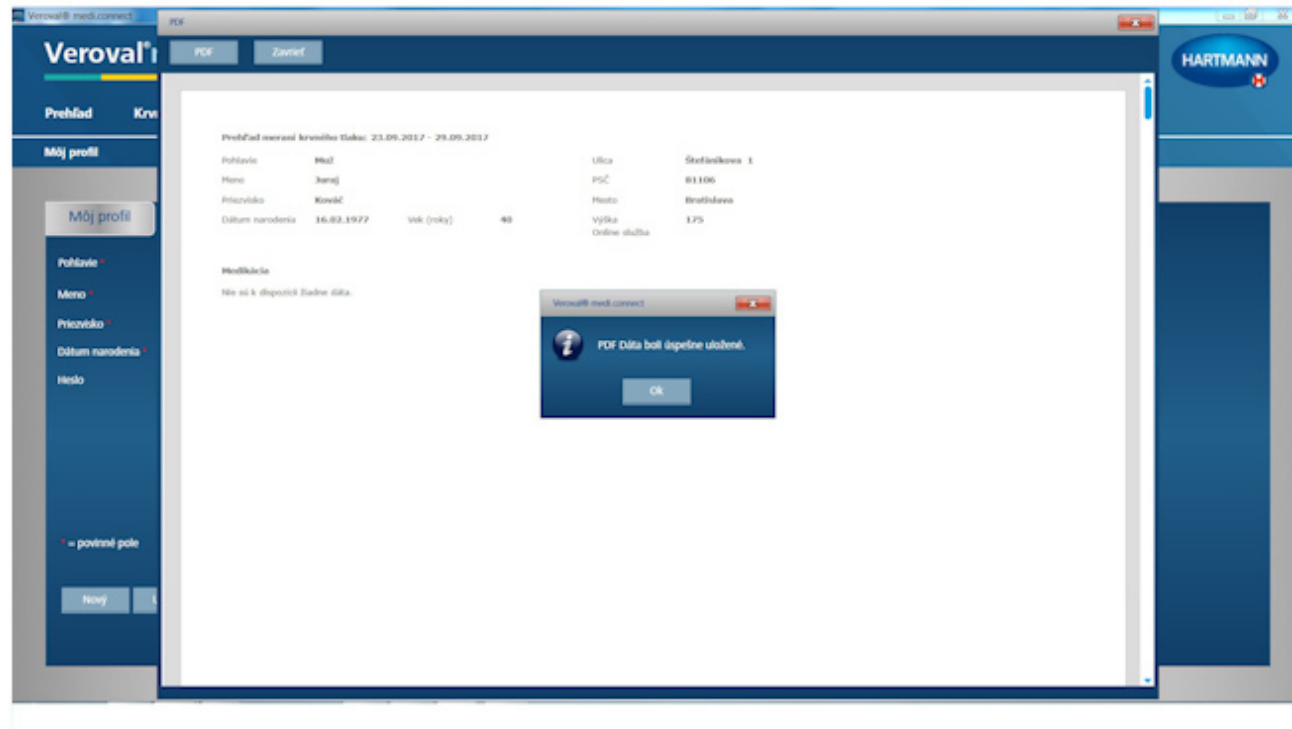

Ak chcete PDF iba vytlačiť,
neklikajte v otvorenom okne na „PDF“, ale na možnosť „Tlač“.

Veroval®

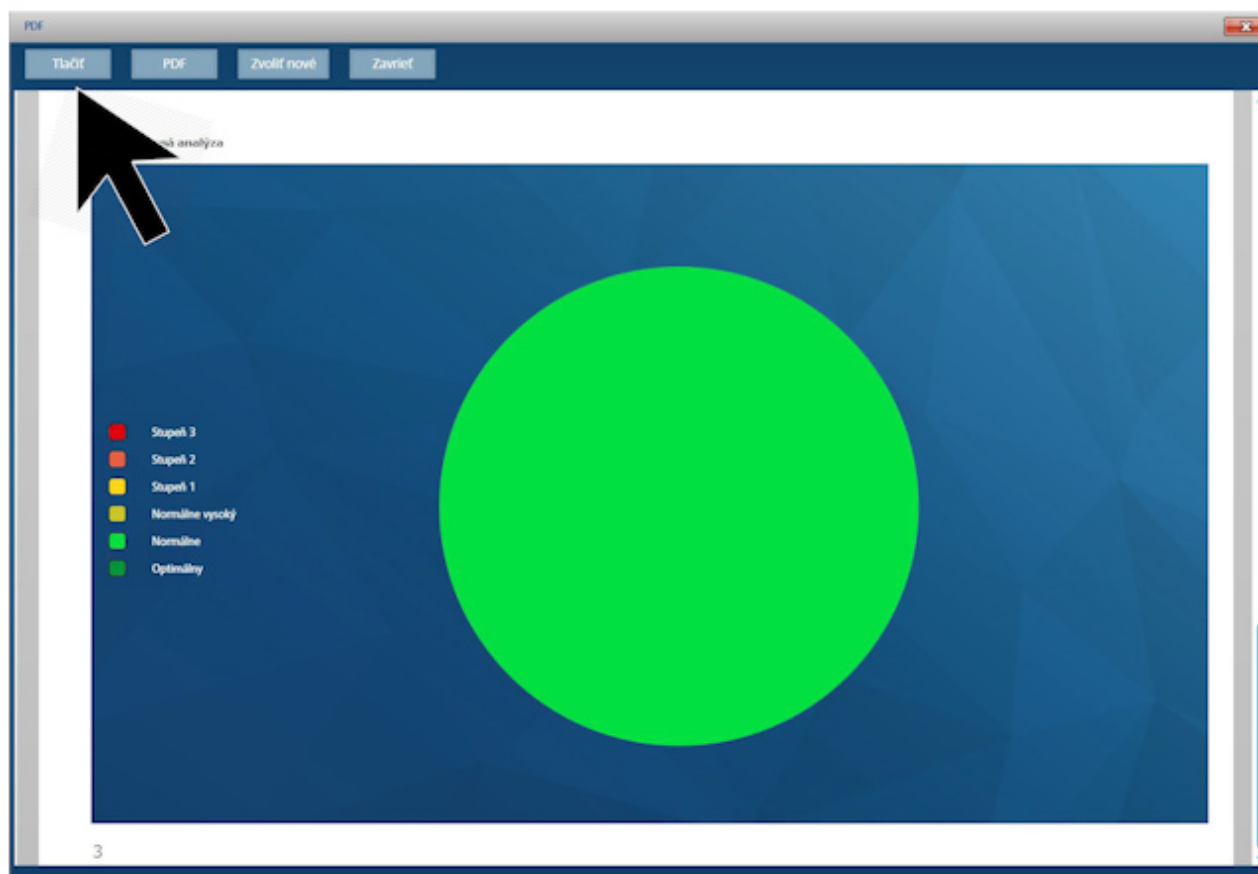

Ak chcete PDF iba vytlačiť,
neklikajte v otvorenom okne na „PDF“, ale na možnosť „Tlač“.

Veroval®

The screenshot displays the Veroval® medi.connect web application interface. At the top, the user is identified as Juraj Kováč, M1 M2, with the HARTMANN logo. The navigation menu includes Prehľad, Krvný tlak (selected), EKG, Hmotnosť, Teplota, Domáci test, Aktivita, and Nastavenia. The main content area is titled 'Krvný tlak' and shows a table of blood pressure readings for the week of 26.12.2015 to 01.01.2016. A single reading is visible: 119/80 mmHg with a heart rate of 58 bpm, marked as 'Vlastná kontrola' (green). To the right, the 'WHO smernica' (WHO guidelines) are shown with a color-coded scale: red (>= 180), orange (160-179), yellow (140-159), light green (130-139), green (120-129), and dark green (< 120). Corresponding diastolic ranges and actions are listed: >= 110 (Kontaktujte lekára), 100-109 (Pravidelná kontrola u lekára), 90-99 (Pravidelná kontrola u lekára), 85-89 (Pravidelná kontrola u lekára), 80-84 (Vlastná kontrola), and < 80 (Vlastná kontrola). Below the table, a note states: 'Hodnoty v zelenej oblasti: Kontrolujte, prosím, hodnoty naďalej pravidelne sami.' (Values in the green area: Please check, continue to check regularly yourself.)

Týždeň	Mesiac	vybrat	Dátum	Čas	Systola	Diastola	Teplotá frekvencia	Porucha srdcového rytmu	Poznámky
			01.01.2016	01:02 AM	119	80	58		

WHO smernica

Systola (in mmHg)	Diastola (in mmHg)	Práca
> = 180	> = 110	Kontaktujte lekára
160 - 179	100 - 109	Pravidelná kontrola u lekára
140 - 159	90 - 99	
130 - 139	85 - 89	Vlastná kontrola
120 - 129	80 - 84	
< 120	< 80	


Priemer

Systola: 119, Diastola: 80, Tepová frekvencia: 58

Hodnoty v zelenej oblasti: Kontrolujte, prosím, hodnoty naďalej pravidelne sami.


Súbor môžete vytlačiť, prípadne uložiť
i prostredníctvom poľa so všeobecnou navigáciou.

Veroval®

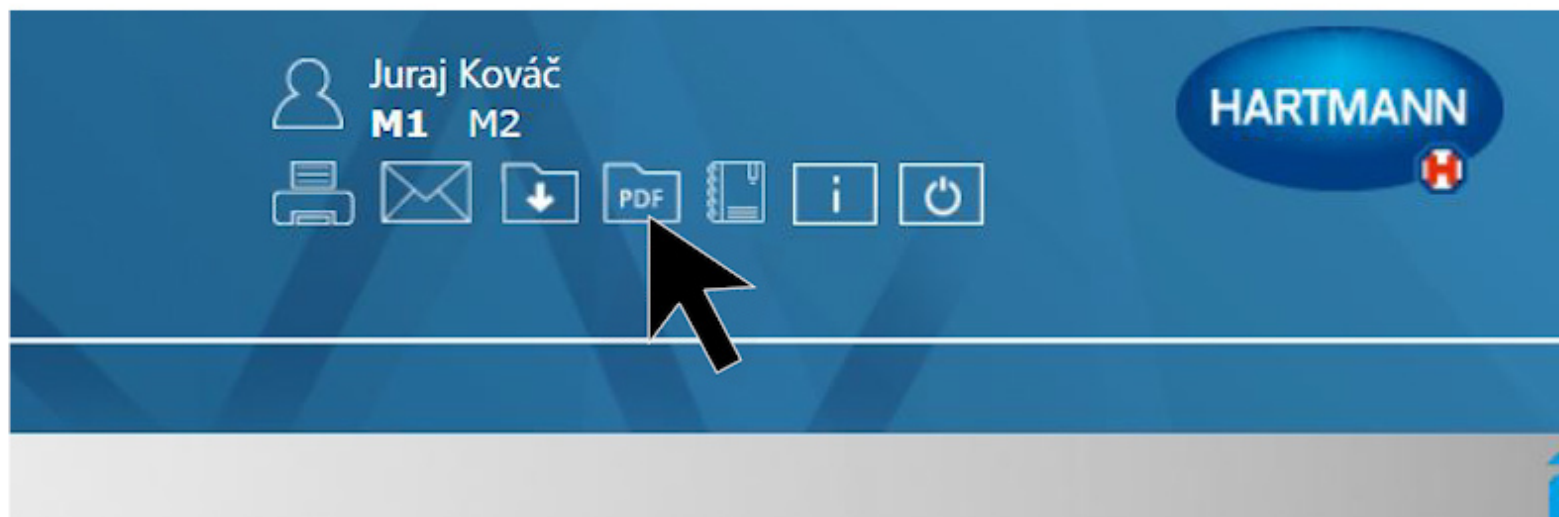

Kliknite jednoducho na symbol PDF alebo tlač.

Veroval®

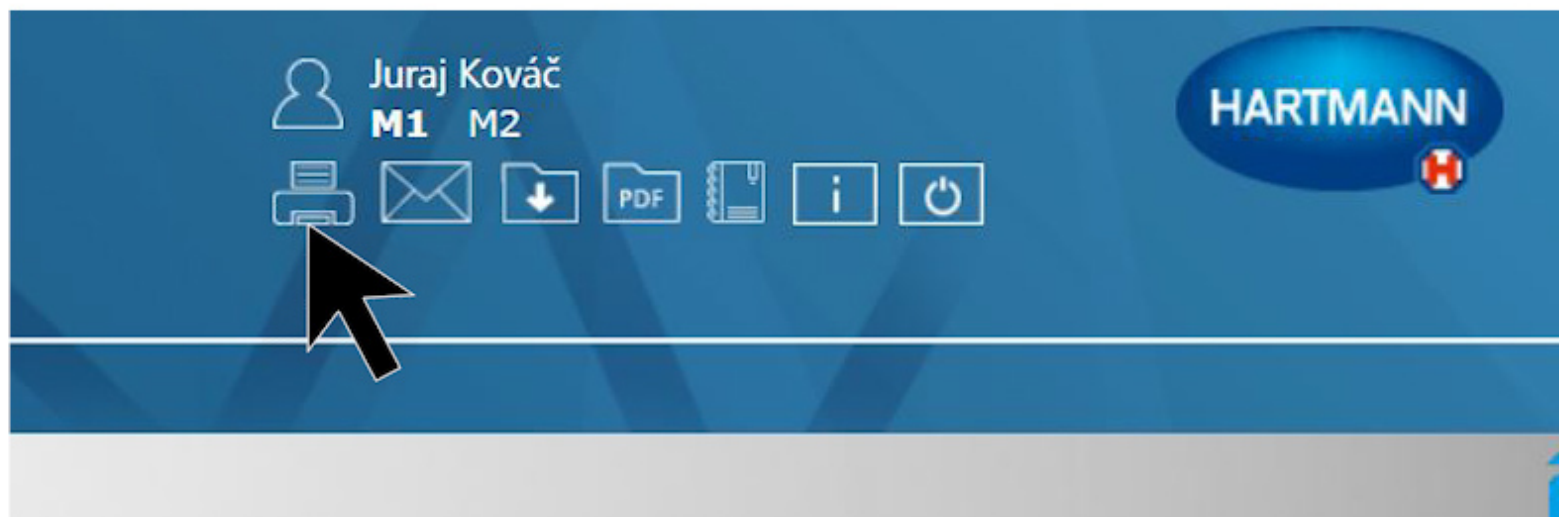


Kliknite jednoducho na symbol PDF alebo tlač.

Veroval®

V novom okne zvolíte hodnoty,
ktoré budete chcieť vytlačiť alebo uložiť.

Veroval[®]

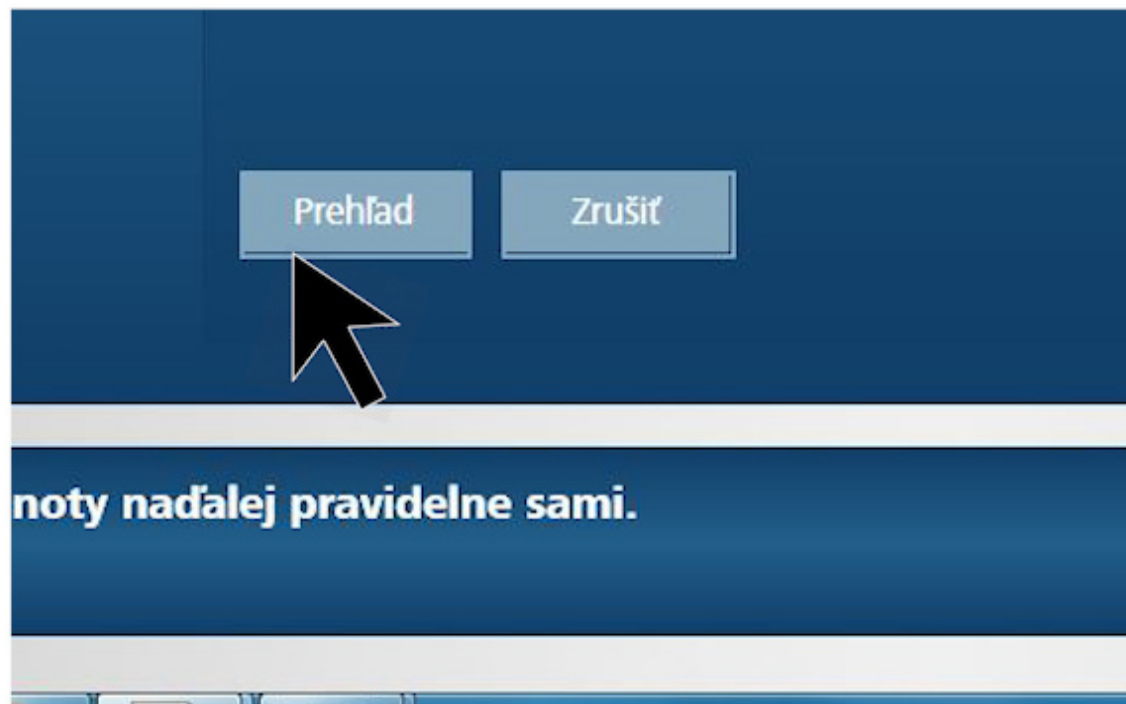

Potom kliknite na „Prehľad“ a pokračujte podľa už známych krokov.

Veroval[®]

