

Veroval® medi.connect



Software Installation Guide دليل تثبيت البرنامج

Veroval®
Blood Pressure
Monitors

فيروفال®
أجهزة قياس
ضغط الدم



Easy data administration and storage

سهولة إدارة وتخزين البيانات



Data transfer for Veroyal® Blood Pressure Monitors

نقل البيانات لأجهزة فيروفال
قياس ضغط الدم

For tracking your values, start by setting-up the date and time on the device before using it.

للتتبع القيم الخاصة بك ، ابدأ بإعداد التاريخ والوقت على الجهاز قبل استخدامه.

1. Select **Blood Pressure** in the software.

1. اختر **Blood Pressure** في البرنامج


2. Plug in the USB Adapter into your PC and wait for the device to mention "PC" on the screen.

2. قم بتوصيل محول USB المرفق بجهاز الكمبيوتر الخاص بك وانتظر حتى يعرض الجهاز "PC" على الشاشة



3. Click on **Data Transfer** and select the Blood Pressure model (Duo Control / Upper Arm / Wrist). It will automatically transmit the recorded values to your computer.

3. انقر فوق نقل البيانات وحدد نموذج ضغط الدم (ديو كونترول / الذراع العلوي / المعصم). سيقوم تلقائيًا بنقل القيم المسجلة إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

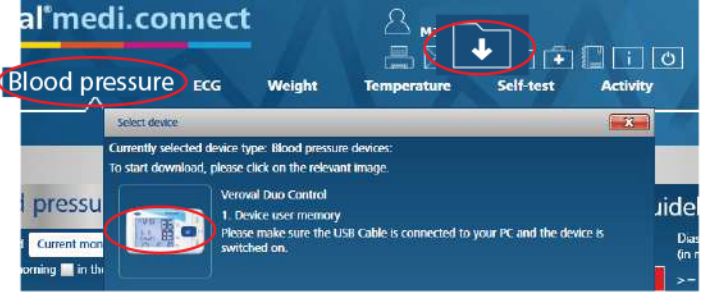


4. After transmission, select the values you want to store, then click **Save**.

4. بعد الإرسال ، حدد القيم التي تريد تخزينها ، ثم انقر فوق **حفظ**

5. The stored values are now saved that you can download as PDF, print or email to your doctor.

5. تم الآن حفظ القيم المخزنة بحيث يمكنك تنزيلها كـ PDF أو طباعتها أو إرسالها بالبريد الإلكتروني إلى طبيبك.

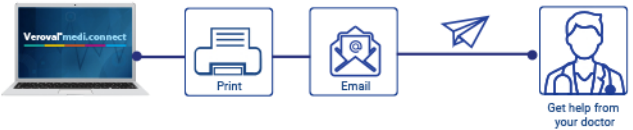

تتبع قيم ضغط الدم الخاصة بك باستخدام MediConnect Veroval®



تنزيل البرنامج والتثبيت

1. قم بزيارة موقع www.veroval.info/en/mediconnect

أنقر على تنزيل برنامج **Download Veroval® medi.connect** وقم بتثبيته.

2. بمجرد اكتمال التثبيت ، يظهر هذا الرمز على شاشة الكمبيوتر.

الوصول والتسجيل

1. انقر مرتين على برنامج Veroval® medi.connect الذي سينقلك إلى الصفحة الرئيسية.

2. اذهب إلى الإعدادات ، ثم ملفي الشخصي في الزاوية اليسرى العلوية واملأ معلوماتك: الجنس ، والعمر ، والطول. في نفس الصفحة ، أدخل كلمة المرور التي تريدها ، ثم انقر فوق حفظ.

3. انقر على **Register on Veroval® medi.connect**

للتسجيل باستخدام بريدك الإلكتروني وكلمة المرور لتتمكن من ذلك مزمنة القيم الخاصة بك والوصول من أي متصفح.

4. اختر جهازك في "الإعدادات":

جهاز ضغط الدم ، تخطيط القلب ، قياس الوزن ، ثم حدد الذاكرة "ذاكرة مستخدم الجهاز 1" ثم انقر فوق حفظ .

5. يمكنك الآن بدء نقل البيانات.

6. لإضافة شخص في الذاكرة 2 ، انتقل إلى ملفي الشخصي ثم اضغط على "جديد".

7. بعد إضافة ملف تعريف جديد ، كرر الخطوة 2 وحدد جهازك كذاكرة "2. ذاكرة مستخدم الجهاز" ثم انقر فوق حفظ.

☒		Veroval upper arm blood pressure monitor	1. Device user memory
☐		Veroval Duo Control	2. Device user memory
☐		Veroval wrist blood pressure monitor	

Keep Track of your values using Veroval® MediConnect


SOFTWARE* DOWNLOAD AND INSTALLATION

1. Visit www.veroval.info/en/mediconnect
Click on **Download Veroval® medi.connect desktop software** and install.
2. Once installation is complete, an icon will show on your computer's desktop.



ACCESS AND REGISTRATION

1. Double click on the **Veroval® medi.connect** software which will take you to the homepage.
2. Go to **Settings** then **My profile** and fill in your information: Gender, Age, Height. On the same page, fill in your desired password, then click Save.
3. Click on **Register on Veroval® medi.connect** with your email and password to be able to synchronize your values and access from any browser.

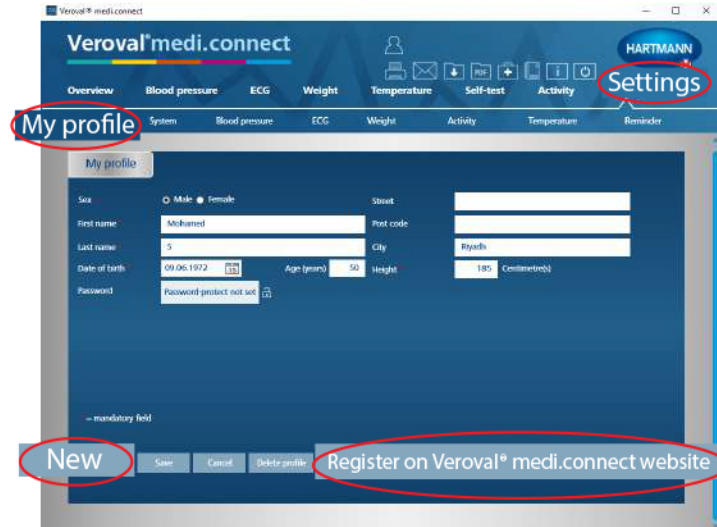

4. In Settings, select your device:
Blood Pressure, ECG, Weight, then select memory
"1. Device user memory" then click Save.

5. You can now start data transfer.

6. For adding a person on Memory 2, go to My profile then click on **"New"**.

7. After adding a new profile, repeat Step 2 and select your device as memory **"2. Device user memory"** then click Save.

